



The Capsule Expander

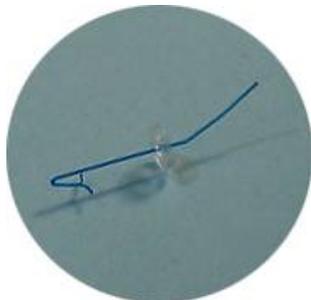

HS-9843 カプセルエキスパンダー
 素材:ポリプロピレン (4個入)
 チン小帯の断裂例や脆弱例に使用し水晶体嚢を安定させ、安全に白内障手術を行う為の器具です。
 <御指導>
 昭和大学藤ヶ丘病院 谷口 教授
 水戸 小沢眼科 小沢院長

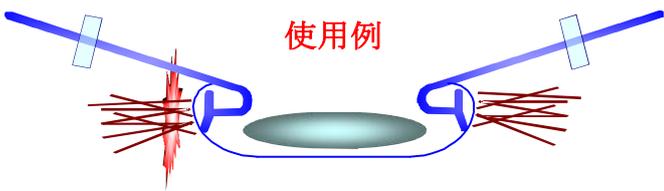

使用例

**New Model Cilia Forceps !
Round Shape & Sharp**



HS-9837 RSS型睫毛鑷子
Round Shape & Sharp
 素材:ステンレス
 ★先端を鋭角にする事により、切れた睫毛などを Pointでの把持が可能です。(肌を押し下げながら睫毛を把持するイメージです)
 ★太い睫毛はボールのように面で取る事が可能です。
 ★丸柄を採用し、フレキシブルな動きが可能です。
 ★柄には手が滑りにくい様な溝を切っております。

**Anterior chamber illumination
for corneal leukoma**




HS-9842 前房内照明 (22G or 25G)
 デバイダー付前房内ファイバー照明
 角膜白斑のある白内障手術に使用いたします。
 前房内から直接照明するため、眼内の視認性が格段に向上し、先端のデバイダーにより、同時に核分割を行う事が可能です。
 <御指導>
 昭和大学藤ヶ丘病院 谷口 教授・西村 先生



HS-9844 圧迫子付未熟児鉤
 圧迫部:5*9*2mm 未熟児鉤部:巾7mm
 全体長:125mm

New Model of titanium speculums

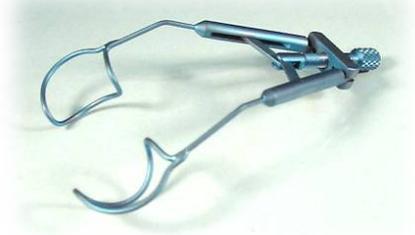

HS-9833D チタニウム開瞼器 クラッツ・バラッケ型
 チタニウム製V字ネジ式開瞼器にクラッツ・バラッケ型が加わりました。
 緩い眼瞼部もウイングによりがっちりガードします。