

LED BRITE SCOPE

HE-252



HE-252 LED単眼倒像検眼鏡
(別売：HE-252B 専用充電器)

*LED Brite Scope is rechargeable bright scope that can be used
for a long time.*

Lamp color LED adoption, lightness, and slimness...

Eye Instruments HANDAYA CO.,LTD

Since 1883

B 検査・診察

外来
処置

検査
診察

検眼
グッズ

視力表
色覚検査表
近点表 他

治療
訓練用品

OP室
関連

刀類

剪刀

持針器

鑷子

鉤・匙

開瞼器
狭瞼器

カニューラ
関連

その他の
鋼製小物

糸・針
糸付針

消耗品
ケース
眼帯
他



京大式 新型倒像検眼鏡

New Indirect Ophthalmic Scope, KYOTO Univ

HE-241

軽量で持ちやすく、倒像検査、網膜剥離の術前・術後の観察に便利です。

■機能■

O：一般倒像検査 G：緑色特殊フィルター Y：黄色フィルター（眼底が混濁している患者用）
光束を虹彩シボリにより、自由な大きさに調節できます。※HD-945 トランス使用

■別売：専用トランス
HD-945 明光トランス



LED BRITE SCOPE



LED単眼倒像検眼鏡（別売：HE-252B 専用充電器）

HE-252

- 光源に電球色LEDを採用し、消費電力が大幅に軽減され時間を気にすることなく検査が可能となり、スリムな形状とコードレス化（充電式）により、取り回しも楽になりました。
- 連続使用可能時間は最大光量で3時間。（充電時間約100分）本体重量は206gと驚くほど軽量になりました。
- 本体ハンドル部に【S】と【L】ロックを採用し、常時点灯・常時消灯状態により往診・移動・連続使用と様々な場面で活用できます。
- 虹彩絞りは当社既存製品と同じく小瞳孔対応しており未熟児検査に優位です。

切替フィルタ：素通し・黄・赤・無赤（オプション：コバルトブルー）
電球：電球色LED 1.0W
照野：プリズムから500mmの位置で6mm～55mm連続可変絞り
照度：最高照度 450LUX プリズムから500mm位置
握りスイッチ：●マーク位置で握り点灯
Sマーク位置でOFF状態ロック
Lマーク位置で常時点灯
充電電池：リチウムイオン電池（3.7V 1400mAh）
寸法・質量：46×257mm（突起含まず）206g

LEDだから、軽く！細く！外来は勿論、病棟回診などにとっても便利です。




プラチード氏角膜計

HE-54

電光式角膜計

HE-54A

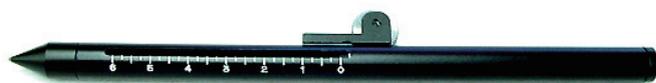


角膜知覚計

Esthsio Meter

HE-222

B 検査 診察

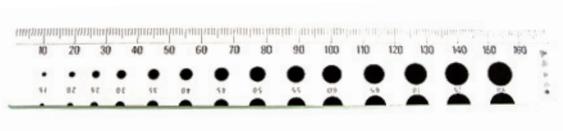


ハーブ氏瞳孔計
PD meter

HE-93




PD計付カバーテスター

HE-96

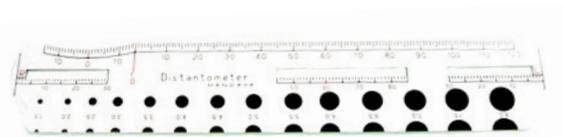

三田式万能計測器
PD meter, MITA

HE-95

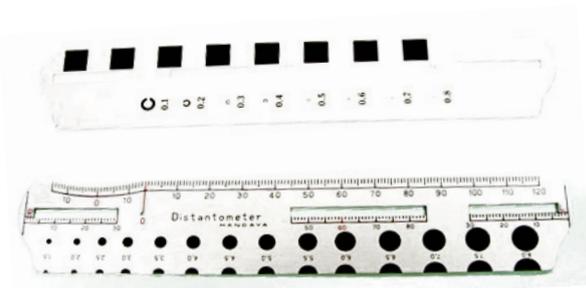

近点表付三田計
PD meter with chart for near point, MITA

HE-98


写真は裏・表



デジタルPDメーター
Digital PD meter

HE-100

0.5mmピッチで瞬時に正確な測定値がデジタル表示されます。

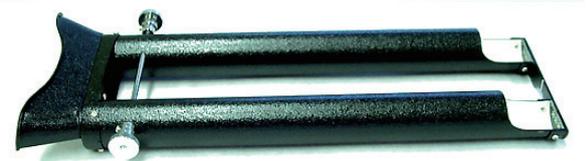

土屋氏瞳孔距離計
PD meter, TSUCHIYA

HE-101

外来
処置

検眼
グッズ

視力表
色覚検査表
近点表 他

治療
訓練用品

OP室
関連

刀類

剪刀

持針器

鑷子

鉤・匙

開瞼器
狭瞼器

カニューラ
関連

その他の
鋼製小物

糸・針
糸付針

消耗品
ケース
眼帯
他

B 検査・診察

外来
処置

検査
診察

検眼
グッズ

視力表
色覚検査表
近点表 他

治療
訓練用品

OP室
関連

刀類

剪刀

持針器

鑷子

鉤・匙


開瞼器
狭瞼器

カニューラ
関連

その他の
鋼製小物

糸・針
糸付針

消耗品
ケース
眼帯
他

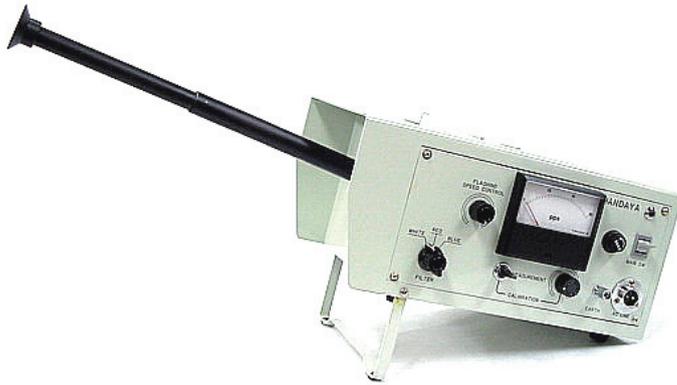

フリッカーテスト器
C.F.F TEST

HE-46

本器はフリップフロップ回路を利用した中心CFF計で、視神経疾患、薬物中毒、偽盲、ヒステリー、眼精疲労、疲労測定等の検査診断に有効な器械です。

白・赤 (643nm)、青 (467nm) 3色のフリッカー値を検査できます。

成人正常値 White 42±3 Red 29±5 Blue 27±5

※小児：上記より-5~-10 視神経疾患：正常値より約40%以上の低下傾向



河本氏板付きレンズ

HE-110

1組：レンズ7枚×4本



畑氏スキヤスコープ

HE-111

1組：レンズ11枚×5本



梶浦氏線状検影器

Streak Retinoscope,KAJIURA


HE-120

■線状検影法は普通の検影法よりはるかに使用が楽で、瞳孔が小さい時、透光体に混濁があっても正確で明るく殊に乱視軸の決定が容易に出来ます。

■検査距離は板付きレンズより通常50cmです。

■HD-941トランスが必要です。

斜視測定の頼もしいパートナー HE-56 ロータリープリズム

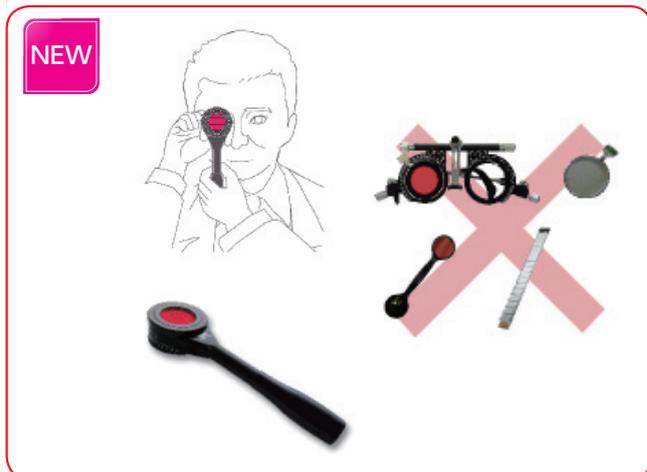

NEW

ロータリープリズム

HE-56

- 測定値は直接プリズムディオプターで表示され、容易にプリズム矯正度数が読み取れます。
 - マドックスは0°、45°、90°、135°、180°にクリックストップが設けてあり、その回転とプリズムとはシンクロナイズされています。
 - プリズムパワーは0~20プリズムディオプターまで連続可変が出来、目盛間隔は1プリズムディオプターとなっています。
- オプション：HE-56B 白マドックス桿

外来
処置

B
検査
診察

検眼
グッズ

視力表
色覚検査表
近点表 他

治療
訓練用品

OP室
関連

刀類

剪刀

持針器

鑷子

鉤・匙


開瞼器
狭瞼器

カニューラ
関連

その他の
鋼製小物

糸・針
糸付針

消耗品
ケース
眼帯
他

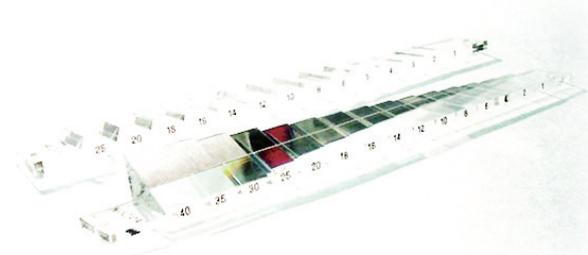

プリズムバー Prism Bar

HO-315

より正確なプリズムバーが完成いたしました。(2枚1組)



ヘルテル眼球突出計

HE-103



ウォース氏四孔検査器

HE-175



ホリアスコープ

HO-360

- 斜視弱視の診断、眼位の検査に有効な器械です。
- 散乱光により被験者にまぶしさを感せず鮮明な角膜反射を観察できます。
- 光を広げる事により両眼一度に観察する事もできます。
- 電球6V 0.6W、本体重量180g
自治医大 山本先生御指導



名大式三柱深径覚計

HE-190

桿柱の太さ(径2.4mm)、桿柱間隔(20~120mm)の変化により種々の距離での検査が可能です。
Size : W26×D55×H39cm 照明装置内蔵

B 検査・診察

外来
処置

検査
診察

検眼
グッズ

視力表
色覚検査表
近点表 他

治療
訓練用品

OP室
関連

刀類

剪刀

持針器

鑷子

鉤・匙

開瞼器
狭瞼器


カニューラ
関連

その他の
鋼製小物

糸・針
糸付針

消耗品
ケース
眼帯
他

B

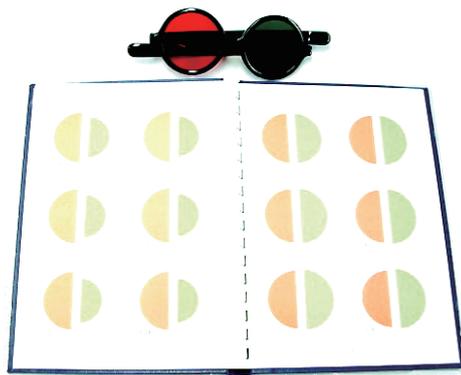


ニューアニサイコニアテスト

New Aniseikonia Test

HO-378 本検査表は赤緑眼鏡を装着して、不等像視を検査測定する画期的な表で、眼鏡矯正に際してアニサイコニアの状態を精密に調べる為の重要な検査表です。

(名古屋大学 粟屋 忍先生)

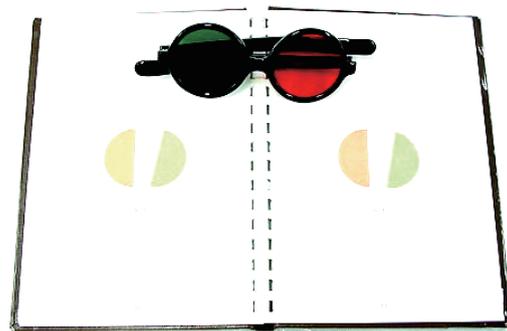

ニューサイクロテスト

New Cyclophoria Test

HO-379 簡単に回旋偏位を定量的に測定できる検査表で、赤緑眼鏡を装着し半月図形を見せ両半月が平行に見える図のNOの数字が回旋偏位を示します。



ニューステレオテスト

New Stereo Test

HO-380 第一表は定性検査用の“アゲハチョウ”の図形であり、第二表は立体図形が手前に浮き出て見える。第三表は向こう側にくぼんでみえる。浮き出して見える図形の方が見やすい人と、逆にくぼんで見える図形のほうが見やすい人があるので両種の立体視を検査するのに便利です。赤緑眼鏡を用いて、40cmの距離で検査します。

(名古屋大学 粟屋 忍先生)

HE-99 Bagolini Lens バゴリーニレンズ



めがねタイプ

HE-99



検眼レンズタイプ (2枚1組)

HE-99B



内掛けタイプ


HE-99C




家庭用

HE-99D


正位で両眼視

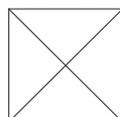

内斜視で複視

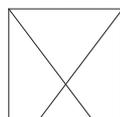

外斜視で複視


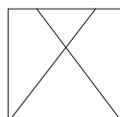


線条レンズ法により斜視の両眼視眼位の異常の有無が簡単に検査できます。

HE-183 Hess Coordimeter ヘスチャートプロジェクター



ヘスチャートプロジェクター **旧タイプ**
HE-183

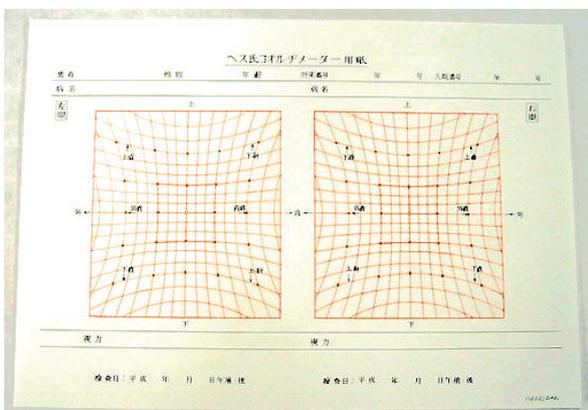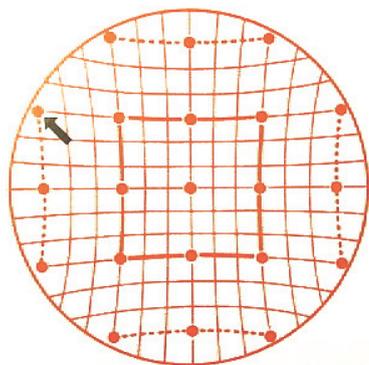

ヘスチャート用紙
HE-157



ヘスチャートプロジェクター **電動光学台.Ver**
HE-183B

■電動光学台付 (HE-283 電動光学台 ワイドサイズ) !
640mm~890mmの可変の電動光学台を採用し、体格等に合わせて高さを調整できます。

■らくらくスペース!
脚部は車椅子や長時間の使用を考慮した形状に設計しております。また、駆動支柱を奥にする事で、ひざ等の妨げになりません。
※脚部 外寸640×375 (内寸幅: 520)

★HE-283 電動光学台 ワイドサイズ も販売いたします。
※フラット天板 (600×450) ・ファン及びヘスチャート用の付属品はついておりません



(複像ならびに眼筋麻痺検査器)

- 検査距離 1m40cm ※1m用も作成可能です。ご注文時にご指定ください。
- 特殊魚眼レンズ使用により本体は患者の前に設置可能。
- 従来の製品より、場所を取らず、また像のゆがみも少なくなりました。
- 赤緑眼鏡は前後移動可能で、非検眼に接近でき従来より広範囲な角度を測定できます。
- 投影用のスクリーンは発売しておりません。(お近くの写真屋さん等でお買い求め下さい)
- 白い壁等でも (凹凸のない事) 投影可能です。

外来
処置

B
検査
診察

検眼
グッズ

視力表
色覚検査表
近点表 他

治療
訓練用品

OP室
関連

刀類

剪刀

持針器

鑷子

鉤・匙

開瞼器
狭瞼器

カニューラ
関連

その他の
鋼製小物

糸・針
糸付針

消耗品
ケース
眼帯
他

B 検査・診察

外来
処置

検査
診察

検眼
グッズ

視力表
色覚検査表
近点表 他

治療
訓練用品

OP室
関連

刀類

剪刀

持針器

鑷子

鉤・匙

開瞼器
狭瞼器

カニューラ
関連

その他の
鋼製小物

糸・針
糸付針

消耗品
ケース
眼帯
他

B



東大式視野計
Perimeter, Tokyo UNIV

HE-136



フェステル氏視野計
Perimeter, Fester

HE-137




小川氏視野計
Perimeter, OGAWA

HE-138



視野検査用指標 5本組 (Φ10mm)
Test Objects For Perimeter


HE-150B 白・赤・黄・緑・青

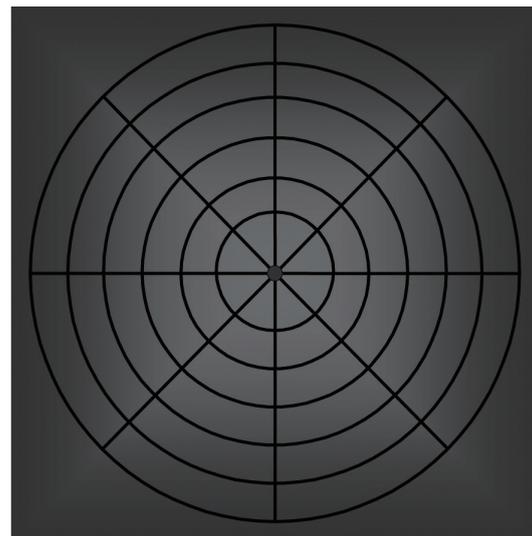

小川氏カンピメーター
Campimeter, OGAWA


HE-143

Rubber sheet / 75cm 黒つや消し ゴム布製
(壁掛け紐付) 検査距離: 75cm

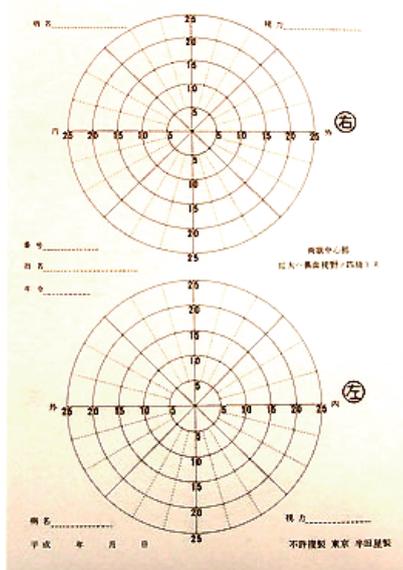

石原式視野検査用紙

HE-151

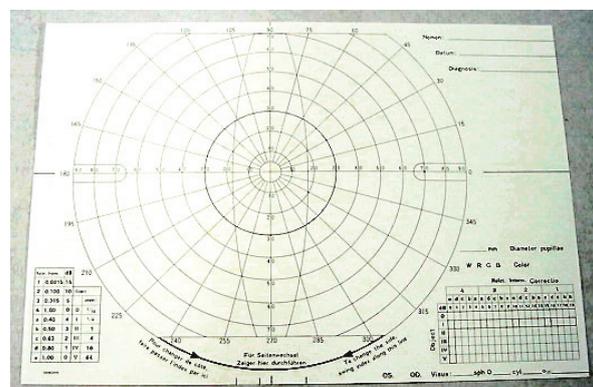

ゴールドマン視野用紙

HE-158



東大式暗室灯
Ophthalmic Dark Room Lamp, Tokyo UNIV
HE-272

外来
処置

B
検査
診察

検眼
グッズ

視力表
色覚検査表
近点表 他

治療
訓練用品

OP室
関連

刀類

剪刀

持針器

鑷子

鉤・匙

開瞼器
狭瞼器

カニューラ
関連

その他の
銅製小物

糸・針
糸付針

消耗品
ケース
眼帯
他



明光トランス (0-10V)
HD-945



携帯用小型トランス (0-12V)
HD-941

B 検査・診察

NEW

外来
処置

検査
診察

検眼
グッズ

視力表
色覚検査表
近点表 他

治療
訓練用品

OP室
関連

刀類

剪刀

持針器

鑷子

鉤・匙

開瞼器
狭瞼器

カニューラ
関連

その他の
鋼製小物

糸・針
糸付針


消耗品
ケース
眼帯
他

Gulden Ophthalmics & Vision Assessment corporation (米国 ギュルデン社 / ビジョンアセスメントコーポレーション社)

米国 ギュルデン社・ビジョンアセスメント社の製品を取扱開始いたしました。
プリズムセットやパネルD-15、フライテストなど、外来検査として欠かせない製品群となっております。
また、パネルD-15は従来の2本組以外に、お求めやすく1本（スタンダード）の販売も開始いたします。



ベレンス氏 角型プリズムセット
AU-S16

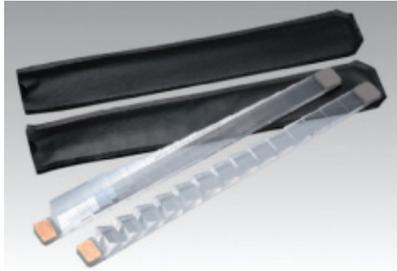

ベレンス氏 プリズムバーセット
AU-BV15-B16



パネルD-15テスト
AU-15126



バタフライ ステレオテスト
AU-VA1010-S



フライ ステレオテスト
AU-VA1000-S



ランダムドット ステレオテスト
AU-VA1005-S

型番	品名	定価	型番	品名	定価
AU-S8	ベレンス氏角型プリズムセット 8個組	30,000	AU-VA1000-S	フライ ステレオテスト	40,000
AU-S16	ベレンス氏角型プリズムセット 16個組	56,000	AU-VA1010-S	バタフライ ステレオテスト	40,000
AU-S22	ベレンス氏角型プリズムセット 22個組	70,000	AU-VA1005-S	ランダムドット ステレオテスト	40,000
AU-11101	ベレンス氏角型プリズム用レッドフィルター	4,000	AU-VA1015	ランダムドット Eテスト	32,000
AU-11101-005~500	ベレンス氏角型プリズム (単品: 1/2~50)	4,000	AU-VA1030S	大人用眼鏡	9,800
AU-11106	ベレンス氏角型プリズムセット用ケース	24,200	AU-VA1031	小児用眼鏡	9,800
AU-BV15-B16	ベレンス氏プリズムバーセット スタンダード	72,000			
AU-BV15	ベレンス氏プリズムバー スタンダード 垂直	45,000			
AU-B16	ベレンス氏プリズムバー スタンダード 水平	45,000			
AU-LB14-15	ベレンス氏プリズムバーセット ロングサイズ	90,000			
AU-LB14	ベレンス氏プリズムバー ロング 垂直	54,000			
AU-LB15	ベレンス氏プリズムバー ロング 水平	54,000			
AU-15126	パネルD-15テスト	70,000			
AU-15130	パネルD-15コンバインドテスト (2本組)	110,000			
AU-15129	アイモデル 白内障用	36,000			
AU-15120	アイモデル LASIK用	36,000			
AU-444	ベレンス氏三色テスト	21,000			
AU-444-6	予備電球 (三色テスト用)	800			
AU-15105	ベレンス氏三色テスト用 赤緑眼鏡	4,500			
AU-12122	遮眼子 マドックス付	5,400			
AU-15161	レチノスコピーラック	38,000			

